



TUTORIAL PARA EL SISTEMA DE CONTROL DE INFORMES

“QUALITAT”

ESQUEMA DISEÑADO CONFORME A LA NORMA

ISO / IEC 17043 : 2023

EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD

REQUISITOS GENERALES PARA LOS ENSAYOS DE APTITUD

www.qualitat.mx



INGRESAR: www.qualitat.mx



AYUDA Y SOPORTE

Para comentarios, dudas o problemas con el programa EEEEC por favor acceda a nuestro **centro de soporte** donde con gusto te atenderemos.



[Ayuda y Centro de Soporte](#)



[Instructivo del sistema de reporte](#)

INICIAR SESIÓN

Clave:

Contraseña:

DATOS DE ACCESO

1: La clave de tu laboratorio se encuentra en la tapa de la caja de los controles.

2: La contraseña es confidencial, si aún no la tienes la puedes solicitar en este portal en el centro de soporte.



2.- HISTORIAL DE REPORTES

♦ Historial de reportes

Ciclo	Programa	Fecha de Captura
220	BIOMETRIA	jueves, 23 de enero de 2025
219	BIOMETRIA	jueves, 23 de enero de 2025
218	BIOMETRIA	jueves, 28 de noviembre de 2024
217	BIOMETRIA	miércoles, 23 de octubre de 2024
212	BIOMETRIA	miércoles, 19 de junio de 2024
213	BIOMETRIA	miércoles, 19 de junio de 2024
209	BIOMETRIA	viernes, 22 de marzo de 2024
210	BIOMETRIA	viernes, 22 de marzo de 2024
208	BIOMETRIA	lunes, 12 de febrero de 2024
207	BIOMETRIA	lunes, 18 de diciembre de 2023
1 <u>2</u>		



3. SELECCIONAR CAPTURA DE RESULTADOS

• Reporte de programas y expedientes:

Captura de Resultados

La evaluación de la ronda actual esta disponible, descarga el archivo QT0 223-234.xls

Consulta tus Diplomas

Encuesta de Satisfaccion

Revisar Resultados del Consenso Mensual

4. SELECCIONAR EL CICLO Y EL PROGRAMA A REPORTAR

5. PARA REALIZAR UNA CAPTURA HAGA CLIC BAJO EL NOMBRE DEL PROGRAMA

INSTRUCCIONES:

Para reportar un programa de clic en el mes correspondiente al ciclo que presenta su control

✓ =Captura realizada y enviada, click para ver reporte individual.

⊗ =Programa no contratado para el ciclo.

Ciclo	BIOMETRIA
223	Abr

6.- EN LA PAGINA DE CAPTURA DE RESULTADOS:

Leer **Atento Aviso**

Conforme a la Norma ISO 17043:2010 la calidad del laboratorio es directamente proporcional a la confiabilidad y a la oportunidad de sus resultados.

- En caso de dudas mande un mensaje por nuestro [Centro de Soporte](#)
- Favor de revisar la agenda mensual en <http://www.qualitat.cc>

- Indique su nombre
- Seleccione su equipo. En caso de no existir en la opción automática, seleccione Otros y anote el que utiliza.
- Haga lo mismo si utiliza varios equipos en un solo programa.
- Anote la temperatura de la recepción del control en su laboratorio
- Anote su correo electrónico

Programa: COAGULACION

Indique su Nombre

Seleccione su equipo

SELECCIONE UN ANALIZADOR ▼

Temperatura del control

Grados Centigrados

Indique su Correo Electrónico

Fecha de Reporte

07/05/2025 03:26:04 p. m.



7.- EN LA PAGINA DE CAPTURA DE RESULTADOS

Antes de capturar los resultados es conveniente que revise cada prueba del programa y sus unidades de **reporte**

Ej.1. BIOMETRIA HEMATICA

Prueba	Unidades
Eritrocitos	M / uL
Hemoglobina	g/dL
Hematocrito	%
VCM	fL
MCH	pg
MCHC	g/dL
Leucocitos	mil / uL
Plaquetas	mil / uL


Ej.2. URIANALISIS

Prueba	Unidades	Ciclo 86
Densidad		Seleccione ▼
PH		Seleccione ▼
Glucosa	mg/dL	
Cetonas	mg/dL	
Bilirrubinas	mg/dL	3
Urobilinogeno	mg/dL	Seleccione ▼

Bilirrubinas
Se puede también en cruces
Reportar de 0 a 3


Capture o seleccione los resultados en el campo correspondiente a cada ciclo y prueba

Si la prueba permite agregar notas: escriba un texto breve de menos de 10 palabras.

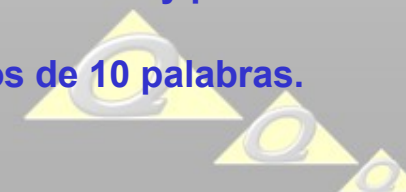


8.- EN LA PAGINA DE CAPTURA DE RESULTADOS

Antes de enviar los resultados es conveniente que revise las Unidades de Reporte

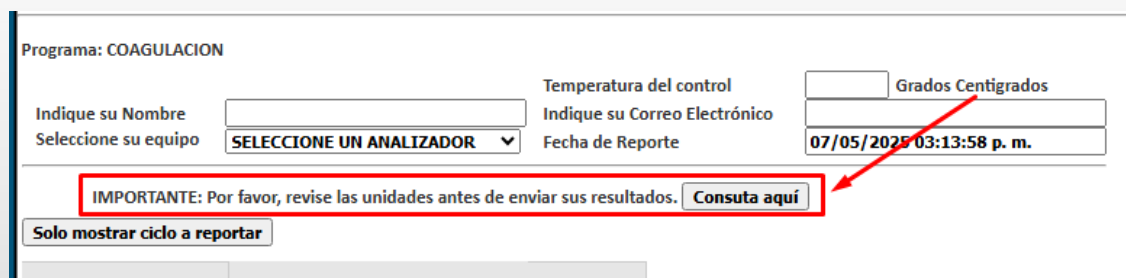

Envíe informe oprimiendo el botón que dice: Enviar Resultados.

Las siguientes imágenes significan:

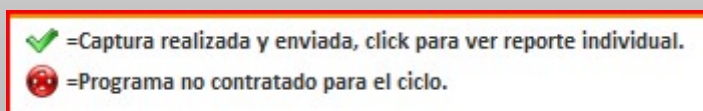

**Reporte preliminar en proceso de validación,
Podrá descargar sus resultados en 48 HRS.**

Laboratorio Clínico: CUENTA PARA PRUEBAS
Reporto: DR ARTURO TERRES
Correo: aterres@qualitat.cc

Clave: QT090

PIV 36

Prueba	Resultado	PIV
TP	15.5	113
TP	1.2	38
TTP	30.5	6
TT	20	11
AT III	101	24
Fibrinogeno	298	21

R=No Reportado

El reporte preliminar se hace en MODO A
(Inter sistemas con trazabilidad)
La validación de PIV > 100 solo se hace con
MODO B (Intra grupal) cuando se justifica
Ej. Enzimas en programa de bioquímica

RECOMENDACIONES:

1. Revise inmediatamente las pruebas no conformes (PIV > 100)
2. Conserve una alícuota del control en óptimas condiciones para mas verificaciones



VALOR ASIGNADO



Valor Asignado = [(Trazabilidad Histórica) + (Trazabilidad Anual) + (Media Mensual)] / 3

"LA PRINCIPAL DIFERENCIA ENTRE LOS PROGRAMAS DE EVALUACION EXTERNA DE LA CALIDAD DESARROLLADOS CONFORME A ISO /IEC 17043:2023 Y LOS QUE UTILIZABAMOS EN EL PASADO DEPENDE FUNDAMENTALMENTE DE QUE EN LOS PREVIOS EL VALOR ASIGNADO DEPENDIA DEL CONSENSO DE RESULTADOS EMITIDOS POR LOS PARTICIPANTES DENTRO DE CADA GRUPO DE TRABAJO MIENTRAS QUE EN LA ACTUALIDAD DAMOS UNA MAYOR IMPORTANCIA A LA TRAZABILIDAD Y A LA VALIDACION DE LOS VALORES ASIGNADOS"

CONSENSO INTRAGRUPAL NO ES SINONIMÓ DE CONFORMIDAD.

PARA MAS INFORMACION CONSULTA
www.qualitat.cc/trazabilidad




VALOR ASIGNADO: MODO A + MODO B



$$\text{Valor Asignado} = [(\text{Trazabilidad Histórica}) + (\text{Trazabilidad Anual}) + (\text{Media Mensual})] / 3$$

VALOR ASIGNADO

MODO A: TRAZABLE : INTERSISTEMAS
MODO B: CONSENSO: INTRAGRUPAL

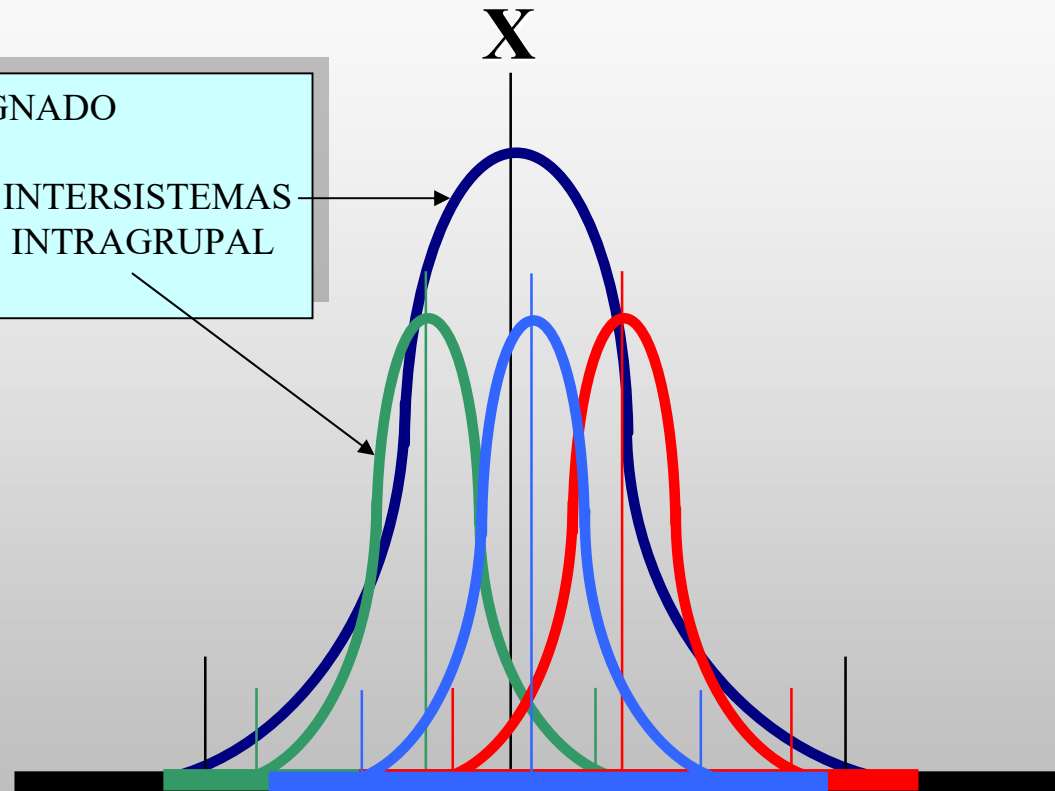

La vigilancia mensual y anual de la trazabilidad valida homogeneidad y estabilidad del control

QC PROCESS

MODO A: EVALUACION AUTOMATICA TODOS LOS RESULTADOS

CUANDO EL PIV > 100 SE PROCEDE A

MODO B: VALIDACION INTRASISTEMA MEDIA MOVIL



10. PARA REVISAR RESULTADOS ENVIADOS HAGA CLICK EN LA PALOMITA DE COLOR VERDE



Ciclo	BIOMETRIA
223	✓
222	✓
221	✓
220	



INFORME DE RESULTADOS DEL ESQUEMA DE EVALUACION EXTERNA DE LA CALIDAD QUALITAT

[Imprimir Documento](#)

Laboratorio Clínico : QUALITAT SA, DE CV
Clave : QT090

Reporto :
e-Mail :
Analizador :
Ciclo :
Programa :
Temperatura en Grados Centígrados :
Fecha de reporte :
Hora de reporte :

ROBERTO GALÁN
lrgalan@qualitat.mx
DEMO
223
BIOMETRIA
22.00
07 mayo 2025
11:11

Resultados Capturados

Prueba	Resultado
Eritrocitos	7
Hemoglobina	10
Hematocrito	27
VCM	50
MCH	25
MCHC	29
Leucocitos	10
Plaquetas	190

QC PROCESS PREANALITICO




11. Para descargar su evaluación ingrese al sistema 48 hrs después de hacer su captura y guarde su archivo en el escritorio de su PC antes de abrirlo

CONSULTA TUS EVALUACIONES			
Expedientes evaluados	Abrir expediente	Descargar Excel '97	Descargar Excel 365
[redacted].xls disponible en: 21 h 41 min			
[redacted].xls			
[redacted].xls			
[redacted].xls			
[redacted].xls			
[redacted].xls			
[redacted].xls			



13. REVISAR EL GRAFICO DEL PIV

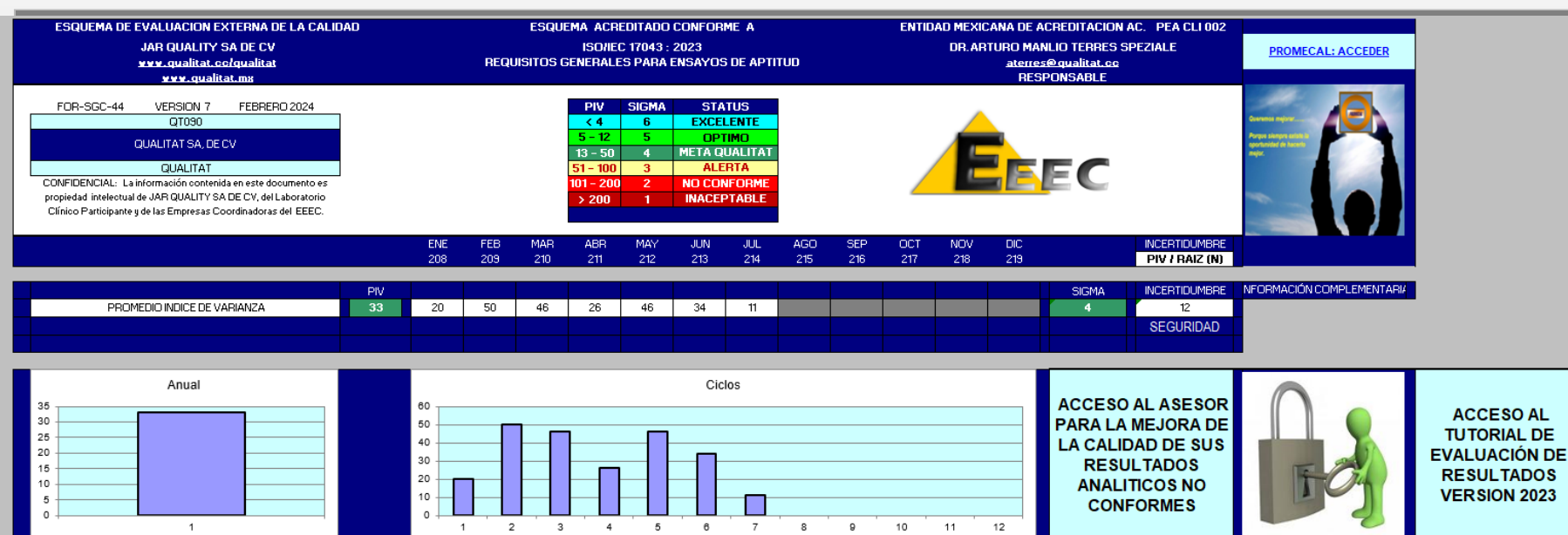

15.- REVISAR EL FORMATO DE REPORTE



CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento es propiedad intelectual de JAR QUALITY SA DE CV, del Laboratorio Clínico Participante y de las Empresas Coordinadoras del Esquema de Evaluación Externa de la Calidad QUALITAT.

ACREDITADO PEA CLI 002 ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION

ISO/IEC 17043 : 2023

REQUISITOS PARA ENSAYOS DE APTITUD

RESPONSABLE
DR ARTURO MANLIO TERRES SPEZIALE
aterres@qualitat.cc

QUALITAT SA, DE CV
EVALUADO DURANTE

Mensurando: Nombre del Analito
Unidad de Medición
Resultado del Laboratorio
Límite de Referencia Mínimo
Límite de Referencia Máximo
Mediana de los Límites de Referencia
Rango = Max - Min
Desviación Estándar Biológica = (Rango / 4)
Tonks = CVB % = Coeficiente Variación Biológico
Valor Esperado Mínimo
Valor Asignado
Valor Esperado Máximo
Aspen = Meta Analítica CVA%
Delta Score = Bias % / Tonks
Bias % = (Valor Reportado / Valor Asignado) - 1
PIV = (Delta Score / 2) * 100

FOR-SGC-39


VERSIÓN 7.0 2024

3/1/2024



N		RESULTADOS	LIMITES		VARIABILIDAD BIOLÓGICA				METAS ANALITICAS				TEMPERATURA		25.00
			MIN	MAX	X	RANGO	DSB	TONKS CVB	VA+/- (VA*ASPEN%)		ASPEN CVA	DELTA SCORE	BIAS %	PIV	
BIOMETRIA HEMATICA		531													
Eritrocitos	M / uL	2.4	4.50	6.50	5.50	2.00	0.50	9.1%	2.29	2.40	2.51	4.5%	0.00	0%	0
Hemoglobina	g/dL	15	12.00	18.00	15.00	6.00	1.50	10%	6.36	6.7	7.04	5%	12.39	123.9%	300
Hematocrito	%	30	35.00	50.00	42.50	15.00	3.75	8.6%	32.31	33.8	35.29	4.4%	-1.27	-11.2%	64
VCM	fL	80.0	75.00	95.00	85.00	20.00	5.00	5.9%	77.89	80.25	82.61	2.9%	-0.05	-0.3%	3
MCH	pg	21.0	20.00	40.00	30.00	20.00	5.00	16.7%	22.28	24.30	26.32	8.3%	-0.81	-13.6%	41
MCHC	g/dL	90	20.00	40.00	30.00	20.00	5.00	16.7%	57.38	62.6	67.82	8.3%	2.63	43.8%	131
Leucocitos	mil / uL	8.0	4.00	11.00	7.50	7.00	1.75	23.3%	6.98	7.90	8.82	11.7%	0.05	1.3%	3
Plaquetas	mil / uL	48.0	150.00	400.00	275.00	250.00	62.50	22.7%	49.19	55.50	61.81	11.4%	-0.59	-13.5%	30


DELTA SCORE

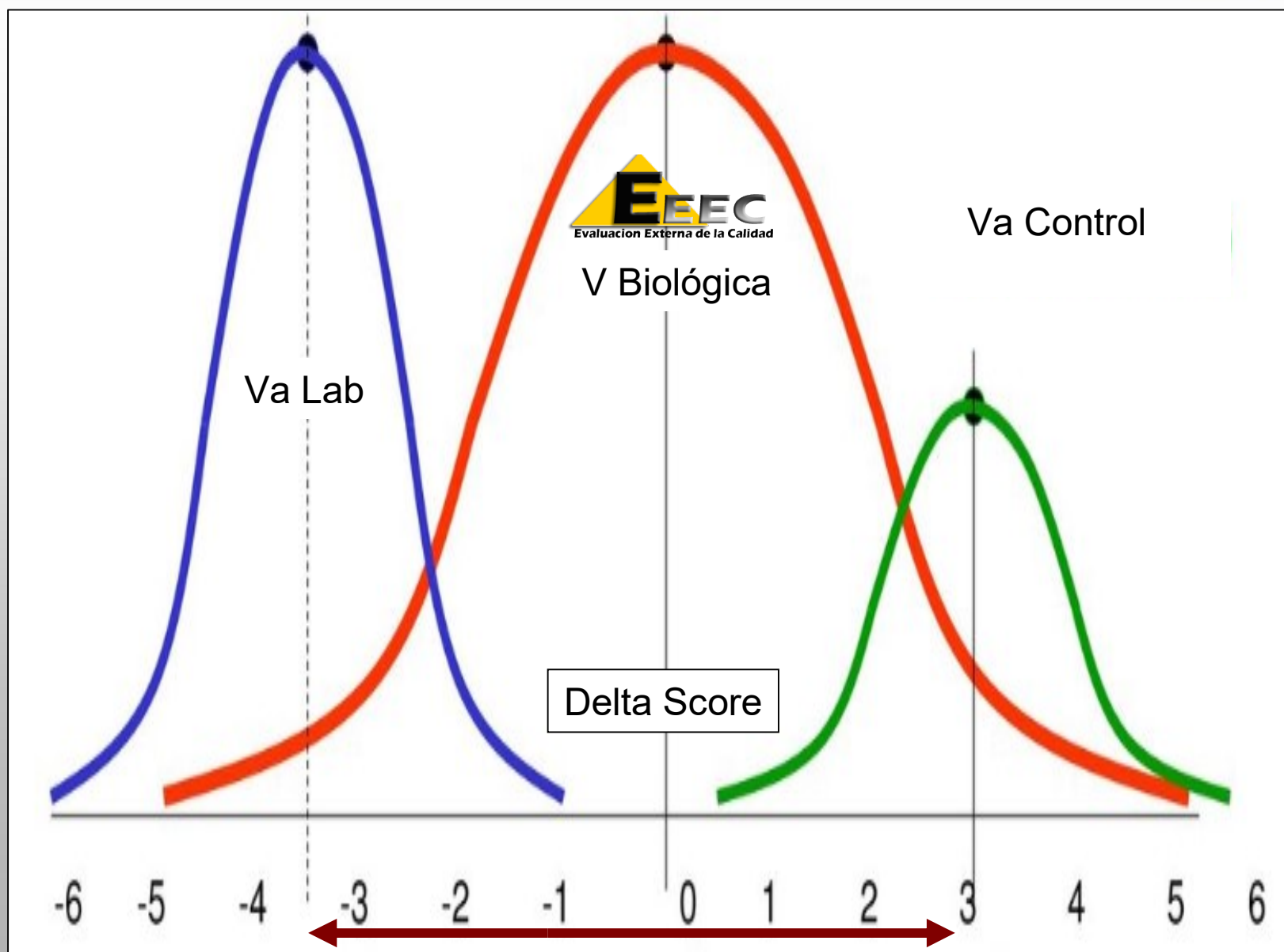

DELTA SCORE

VALOR ASIGNADO

VALOR REPORTADO

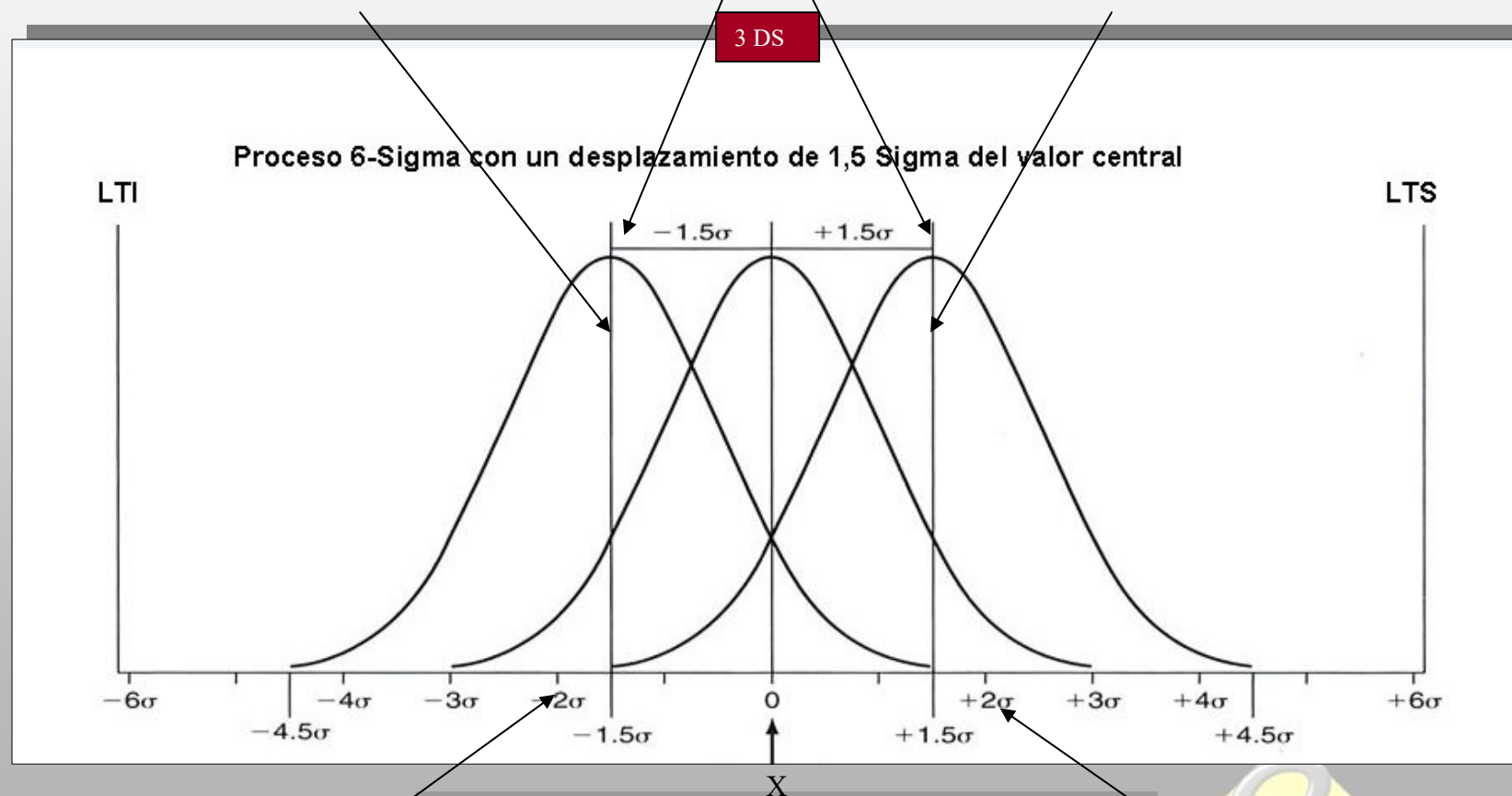

LIMITES DE REFERENCIA

DELTA SCORE



$$\text{DELTA SCORE} = (\text{Bías \%} / \text{Tonks \%})$$

EEC < 1 Delta

EN CONTROL

EEC > 1 Delta

ALERTA


EEC > 2 Delta

NO CONFORME

$$\text{PIV} = (\text{DELTA} / 2) 100$$

NIVELES DE CONFIABILIDAD

CONFIABILIDAD : EXACTITUD Y PRECISION						
P	Q	R	S	T	U	V
T: LAB	DELTA SCORE	T: GPO	BIAS %	CVR ASPEN	ERROR TOTAL	INDICE VARIANZA
0.9	0.3	0.6	4%	0.5	0.2	17

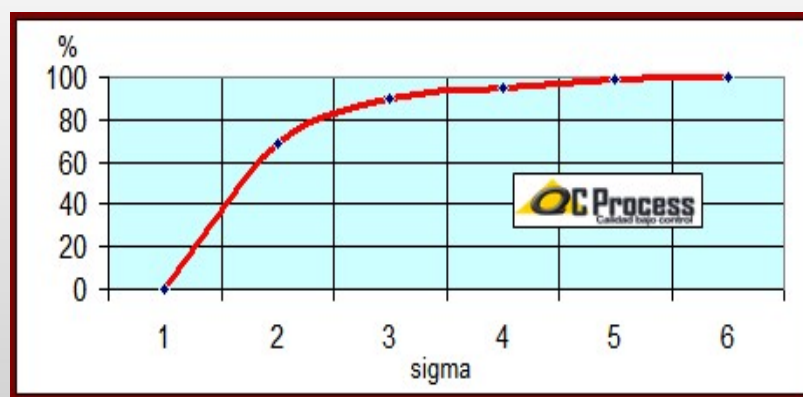

U

ET = Error total = Raiz ((Q)² x (T)²))

V

IV = Índice de Varianza = ET x 100 = (U x 100)

PIV	SIGMA	STATUS
< 4	6	EXCELENTE
5 - 12	5	OPTIMO
13 - 50	4	META QUALITAT
51 - 100	3	ALERTA
101 - 200	2	NO CONFORME
> 200	1	INACEPTABLE



DIPLOMA EEEC QUALITAT

REQUISITOS

- 1.- HABER PARTICIPADO EN CUANDO MENOS 10 DE LOS 12 CICLOS ANUALES
- 2.- TENER UN TODOS LOS MESURANDOS BAJO CONTROL CON UN PIV DE < DE 100
- 3.- PRESENTAR EVIDENCIA DE MEJORA EN LOS ANALITOS NO CONFORMES

ELIJA LA OPCION C EN LA PAGINA DE BIENVENIDA DE
www.qualitat.mx

Captura de Resultados

Su expediente de la ronda actual esta siendo actualizado acorde a la evaluación del ciclo mensual 223.

Consulta tus Diplomas

Encuesta de Satisfaccion

Revisar Resultados del Consenso Mensual

A partir del año 2013 el 100% de los Diplomas solo se envían por este medio una vez que el Laboratorio ha aprobado la ronda anual.

